

辅酶 II NADP (H) 检测试剂盒（微量法）

货号：PMK1011

保存：-20℃避光保存 6 个月

规格：48T/24S 96T/48S

检测范围：0.5-10 μ M 灵敏度：0.5 μ M

适用样本：动植物组织、细胞、细菌、血清（浆）

产品简介

烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NADP）是很多氧化还原反应的辅酶，包括 NADP⁺（氧化型）和 NADPH（还原型）两种形式。NADP⁺也参与到生物合成反应中，比如脂质和核酸的合成。在动物细胞中，戊糖磷酸途径（pentose phosphate pathway, PPP）的氧化阶段是 NADPH 最主要的来源。NADP⁺/NADPH 的测定主要应用于有关细胞或组织能量转化和氧化还原状态的研究中。本试剂盒提供了一种简单的比色法来检测细胞、组织和细菌样品中 NADP⁺（氧化型辅酶 II）和 NADPH（还原型辅酶 II）各自的量、比值和总量。其原理是分别用酸性和碱性提取液提取样品中 NADP⁺和 NADPH，基于葡萄糖脱氢酶循环反应（不识别 NAD⁺/NADH），在这一反应过程中生成的 NADPH 将 WST-8 还原生成橙黄色的 formazan（甲臞），在 450nm 左右检测有最大吸收峰。反应体系中生成的 formazan 与样品中总的 NADP⁺或 NADPH 的总量呈正比关系。

产品内容

试剂盒组分	规格		储存条件
	48T	96T	
反应缓冲液	5mL	10mL	4℃
底物	1mL	2mL	4℃
显色物	0.75mL	1.5mL	4℃避光保存
酶制剂	60 μ L	120 μ L	-20℃保存
NADPH 标准品（10mM）	100 μ L	100 μ L	-20℃保存
NADP（酸性）提取液	50mL	100mL	4℃
NADPH（碱性）提取液	50mL	100mL	4℃

自备耗材

酶标仪或可见分光光度计（能测 450nm 处的吸光度）

水浴锅、制冰机，低温离心机

96 孔板或微量玻璃比色皿，可调节式移液枪及枪头

去离子水

匀浆器（如果是组织样本）

试剂准备

注意：各组分（小管试剂）开盖前，请先低速离心。

反应缓冲液：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

底物：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

显色物：即用型；整个实验过程中，冰上避光放置；4℃避光保存。

产品说明书

酶制剂 即用型；整个实验过程中，冰上避光放置；-20℃保存。

NADP（酸性）提取液：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

NADPH（碱性）提取液：即用型；使用前，平衡到室温；4℃保存。

工作液配制：测定孔每孔配制 85μL 测定工作液，现配现用。吸取 64μL 反应缓冲液，1μL 酶制剂，10μL 显色物混合后，室温孵育 5min，再加入 10μL 底物。

对照孔每孔配制 85μL 对照工作液：吸取 75μL 反应缓冲液，10μL 显色物。

NADPH 标准曲线设置：把 1μL 10mM 的 NADPH 标准品用 999μL 反应缓冲液稀释至 1mL 10μM NADPH 标准品。按下表所示，进行下一步稀释：

	10μM NADPH 标准品体积 (μL)	反应缓冲液体积 (μL)	浓度 (μM)
Std1.	100	0	10
Std2.	80	20	8
Std3.	60	40	6
Std4.	40	60	4
Std5.	20	80	2
Std6.	10	90	1
Std7.	5	95	0.5

注意：每次实验，请使用新配制的标准品，NADPH 标准品（10mM）分装保存于-20℃。

样本制备

组织中 NADP 和 NADPH 的提取：

NADP 的提取：称取 0.1g 组织，加入 0.5mL NADP（酸性）提取液，冰浴匀浆，95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积碱性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。（相当于 0.1g 组织+1mL 提取液）

NADPH 的提取：称取 0.1g 组织，加入 0.5mL NADPH（碱性）提取液，冰浴匀浆，95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积酸性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。（相当于 0.1g 组织+1mL 提取液）

细胞或细菌中 NADP 和 NADPH 的提取：

NADP 的提取：收集 500 万细胞或细菌到离心管内，用冷 PBS 清洗细胞，低速 600g 离心 5min，弃上清液，加入 0.5mL NADP（酸性）提取液，冰浴超声波破碎 5min（功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 7s，重复 30 次），95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积碱性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。（相当于 500 万细胞或细菌+1mL 提取液）

NADPH 的提取：收集 500 万细胞或细菌到离心管内，用冷 PBS 清洗细胞，低速 600g 离心 5min，弃上清液，加入 0.5mL NADPH（碱性）提取液，冰浴超声波破碎 5min（功率 20%或 200W，超声 3s，间隔 7s，重复 30 次），95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积酸性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。（相当于 500 万细胞或细菌+1mL 提取液）

血清（浆）中 NADP 和 NADPH 的提取

NADP 的提取：吸取 0.1mL 血清（浆），加入 0.5mL NADP（酸性）提取液，95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积碱性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。（相当于 0.1mL 血清（浆）+1mL 提取液）

NADPH 的提取：吸取 0.1mL 血清（浆），加入 0.5mL NADPH（碱性）提取液，95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失）；冰浴中冷却后，10,000g 4℃离心 10min；取上清液，加入等体积酸性提取液使之中和，混匀，10,000g 4℃离心 10min，取上清待测。

注意：推荐使用新鲜样本，如果不立即进行实验，样本可在-80℃保存 6 个月。

产品说明书

实验步骤

1. 酶标仪或可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长到 450nm，可见分光光度计去离子水调零。
2. 在 96 孔板或微量玻璃比色皿中按照如下方式加样：

试剂	空白孔 (μL)	标准孔 (μL)	测定孔 (μL)	对照孔 (μL)
反应缓冲液	40	0	0	0
不同浓度标准品	0	40	0	0
样本	0	0	40	40
测定工作液	80	80	80	0
对照工作液	0	0	0	80

3. 充分混匀，室温孵育 30min，测定 450nm 处的吸光值 A。计算 $\Delta A_{\text{测}} = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 、 $\Delta A_{\text{标}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。空白管只需做 1 管。

- 注意：1. 该分析基于酶催化的动力学反应，工作液的加入需要迅速，各组分需要彻底混合。
2. 为避免干扰实验，样本中应避免有如下物质存在：EDTA (>0.5 mM)，ascorbic acid, SDS (>0.2%)，sodium azide, NP-40 (>1%) 及 Tween-20 (>1%)。
3. 实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验，如果 $\Delta A_{\text{测}}$ 小于 0.001 可适当加大样本量，如果 $A_{\text{测}}$ 大于 1.0，样本可用去离子水进一步稀释，计算结果乘以稀释倍数。

结果计算

1. 标准曲线的绘制

以标准品浓度为 y 轴， $\Delta A_{\text{标}}$ 为 x 轴，绘制标准曲线（浓度为 y 轴更方便计算结果）。将 $\Delta A_{\text{测}}$ 代入标准曲线来计算样本中 NADP/NADPH 的浓度 y (μM 即 nmol/mL)。

2. 测定 NADP/NADPH 含量的计算公式

1) 按样本质量计算：

$$\text{NADP/NADPH (nmol/g)} = (y \times V_{\text{样}}) \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{提取}}) \times n = y \div W \times n$$

2) 按细菌或细胞数量计算：

$$\text{NADP/NADPH (nmol/10}^4 \text{ Cells)} = (y \times V_{\text{样}}) \div (\text{细胞数量} \times V_{\text{样}} \div V_{\text{提取}}) \times n = y \div 500 \times n = 0.002y \times n$$

3) 按液体体积计算：


$$\text{NADP/NADPH (nmol/mL)} = (y \times V_{\text{样}}) \div (V_{\text{液}} \times V_{\text{样}} \div V_{\text{提取}}) \times n = 10y \times n$$

$V_{\text{样}}$ ：加入样本体积，0.04 mL； $V_{\text{提取}}$ ：加入提取液体积，1mL；W：样本质量，0.1g；500：细胞数量，500 万；

$V_{\text{液}}$ ：液体样本体积，0.1mL；n：样本进一步稀释倍数。

结果展示

典型标准曲线-以下数据和曲线仅供参考，实验者需根据自己的实验建立标准曲线。

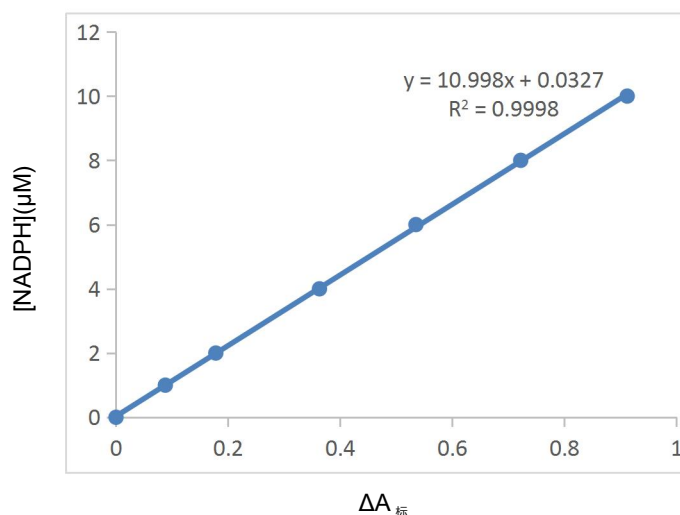

产品说明书

注意：在这些浓度下，NADP 和 NADPH 的标准曲线是相同的。此说明书中，我们仅提供 NADPH 标准曲线。

注意事项

1. 实验过程中请穿戴实验服、口罩和乳胶手套。请按照生物实验室的国家安全规定进行实验，尤其是在检测血样或其他体液时。
2. 本试剂盒仅用于实验室科学研究，如果本试剂盒用于临床诊断或任何其他用途，我们将不对任何后果负责。
3. 本试剂盒应在有效期内使用，并请严格按照说明书进行存储。
4. 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用；否则，可能导致结果异常。
5. 勤换吸头，避免各组分之间的交叉污染。

相关产品：

PMK1013 6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PDH）/葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒（微量法）

PMK1017 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶（6PGDH）检测试剂盒（微量法）

PMK1018 肌酸激酶（CK）检测试剂盒（微量法）

PMK0999 辅酶 I NAD(H) 检测试剂盒（微量法）

更多产品详情了解，请关注公众号：

